

Cântar Smart eufy P1

Instrucțiuni de siguranță importante

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.
- Utilizați dispozitivul numai așa cum este descris în acest manual de utilizare. Orice utilizare greșită poate provoca șocuri electrice, arsuri, aprinde un incendiu sau alte pericole neașteptate.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu vârsta peste 16 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea cântarului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Rețineți că acest dispozitiv este conceput pentru ca indivizii să-și măsoare greutatea și să-și monitorizeze compoziția corporală. Orice informație furnizată de acest dispozitiv nu este în niciun fel menită să trateze, să vindece sau să prevină apariția bolilor sau a bolilor.
- NU utilizați acest dispozitiv dacă sunteți gravidă sau dacă bănuiți că ați putea fi însărcinată. Efectele acestui dispozitiv asupra unui făt sunt necunoscute și netestate.
- NU utilizați acest dispozitiv dacă utilizați un dispozitiv electronic portabil sau implantat, cum ar fi un defibrilator sau un stimulator cardiac.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de persoane care sunt bolnave acut sau cronic, care suferă de boli sau care iau medicamente care pot afecta nivelul apei. Acuratețea citirilor pentru acești indivizi nu a fost verificată. Un sfat medical specific trebuie obținut de la un medic.
- Aparatul este echipat cu o funcție de transmisie a datelor care emite energie electromagnetică. Echipamentele portabile de comunicații cu radiofrecvență (RF) (inclusiv periferice, cum ar fi cablurile de antenă și antene externe) nu trebuie utilizate la o distanță de 30 cm (12 inch) de dispozitiv, în caz contrar, performanța poate fi afectată.
- Nu modificați acest dispozitiv.
- Nu expuneți acest dispozitiv la temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, umezeală sau medii corozive.
- Pentru a preveni alunecarea, nu călcați pe dispozitiv după baie sau duș.
- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat atunci când este adiacent sau stivuit deasupra altui dispozitiv, deoarece ar putea cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Dacă o astfel de utilizare este necesară, acest dispozitiv și celălalt dispozitiv trebuie să fie observate pentru a verifica dacă funcționează normal.
- Acest dispozitiv este alimentat de trei baterii AAA. Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile, deoarece acest lucru poate cauza scurgeri sau explozia bateriilor.
- Acest dispozitiv poate fi alimentat cu baterii reîncărcabile.
- Nu amestecați și utilizați diferite tipuri de baterii împreună, de ex. baterii litiu-ion (Li-ion) și baterii nichel-metal hidruură (NiMH).
- Nu amestecați bateriile noi și uzate.

- Bateriile uzate trebuie plasate într-o pungă de plastic sigilată și aruncate în siguranță, conform reglementărilor locale de mediu.
- Dacă dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile înainte de a depozita dispozitivul într-un loc răcoros și uscat.

Sfaturi de utilizare:

Pentru a asigura acuratețea măsurării, urmați instrucțiunile de mai jos când începeți măsurarea:

- Așezați cântarul pe o suprafață plană și tare. Suprafețele moi, cum ar fi mocheta, vor afecta performanța cântarului.
- Pășiți pe platformă cu picioarele goale. Stați nemișcat și mențineți contactul complet cu electrozii până când măsurarea este completă.
- Pentru cele mai consistente măsurători, cântăriți-vă în aceeași oră a zilei și în aceeași locație.
- Evitați să vă cântăriți imediat după exerciții fizice intense, după saună, după ce ați făcut baie sau ați băut și mâncat.
- Starea pielii de pe partea de jos a picioarelor poate afecta măsurarea. Efectele naturale ale îmbătrânirii sau ale activității pot întări această piele. Luați măsurătorile cu picioarele curate, ușor umede pentru cea mai bună acuratețe.
- Estimările procentului de grăsime corporală vor varia în funcție de cantitatea de apă din organism și pot fi afectate de deshidratare sau suprahidratare din cauza unor factori precum consumul de alcool, menstruație, boală, exerciții fizice intense etc.

Înștiințare



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie livrat la o unitate de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.



Acest simbol înseamnă „Consultați manualul de instrucțiuni sau broșura”.



Declarație de conformitate

Acest produs respectă cerințele privind interferențele radio ale Comunității Europene. Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că echipamentul radio de tip T9147 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.eufylife.com/>.

Puterea maximă de ieșire: 4 dBm


Banda de frecvență: banda 2.4G (2.4000GHz - 2.4835GHz)

Ce e în cutie

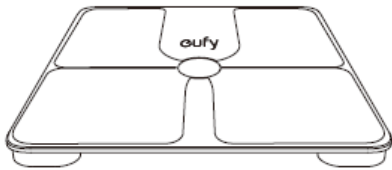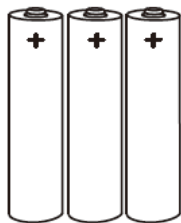		
Cântar Smart P1	Baterii AAA (×3)	Manualul proprietarului & Alte documente

Introducerea bateriilor

1. Întoarceți cântarul și așezați-l pe o suprafață plană.
2. Deschideți capacul bateriei și introduceți trei baterii AAA. Asigurați-vă că capetele pozitive și negative sunt îndreptate către direcțiile de polaritate corecte marcate în compartimentul bateriei. Cifrele “8888” vor apărea pe afișajul LED.
3. Închideți capacul bateriei și așteptați până când cifrele “00” vor apărea pe ecranul LED.

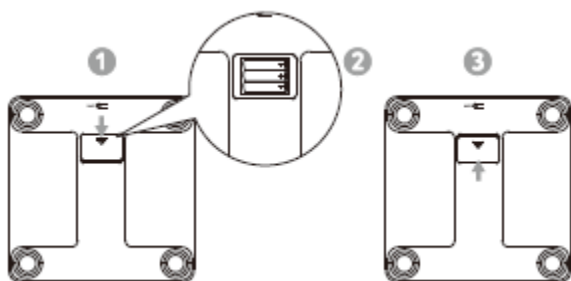


Sfat:

Lo va apărea pe afișajul LED când bateriile sunt descărcate. Înlocuiți toate cele trei baterii în același timp. Nu amestecați bateriile noi cu cele uzate.

Selectarea unității de măsură


Apăsați butonul **UNIT** din partea de jos a cântarului pentru a parcurge și selecta unitatea de măsură: lb (pound) / kg (kilogram). Unitatea de măsură poate fi selectată și din aplicația

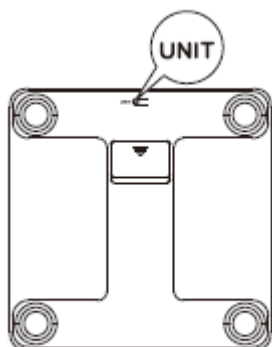

EufyLife.

Instalarea aplicației EufyLife și împerecherea

1. Descărcați aplicația EufyLife din App Store (dispozitive iOS) sau Google Play (dispozitive Android).
2. Activați Bluetooth pe smartphone sau tabletă.
3. Deschideți aplicația EufyLife și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia cântarul cu dispozitivul dvs.

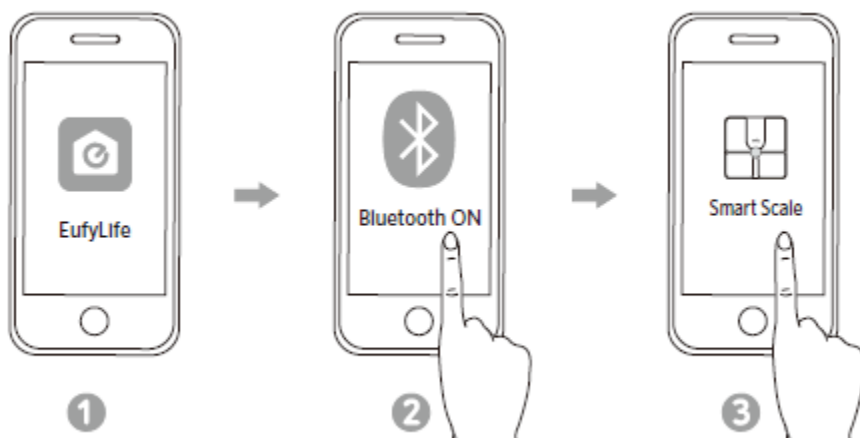

- Odată asociate, aplicația și cântarul se vor conecta automat data viitoare când aplicația este deschisă.

	Pictograma de stare	Indică
	Intermitent	Se împerechează
	Stabil	Conectat



- Acest cântar este compatibil cu dispozitivele care rulează iOS 9.0 și versiuni ulterioare sau Android 4.4 și versiuni ulterioare.
- Nu asociați cântarul din meniul Bluetooth al smartphone-ului dvs. Utilizați aplicația EufyLife pentru a asocia cântarul cu smartphone-ul dvs.


Pornirea unei măsurători

Înainte de a efectua prima măsurătoare, va trebui să creați și să configurați un ID de utilizator în aplicația EufyLife.

1. Așezați cântarul pe o suprafață dură și plană.
2. Deschideți aplicația EufyLife și selectați Smart Scale pe pagina de pornire a dispozitivului.
3. Pășește desculț pe cântar.
 - O analiză a compoziției corpului tău va începe automat.



Pășește desculț pe centrul cântarului. Stați nemișcat și mențineți contactul complet cu electrozii până când măsurarea este completă.

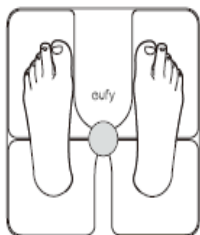

Măsurare numai în greutate




Acest cântar poate fi folosit ca și cântar convențional pentru citirea greutateii.

Pentru a vă măsura greutatea actuală, puteți:


- urcă pe cântar purtând pantofii; sau
- selectați modul de măsurare numai pentru greutate în aplicația EufyLife.

Întreținere

Curățați în mod regulat cântarul cu o cârpă moale uscată sau ușor umezită.

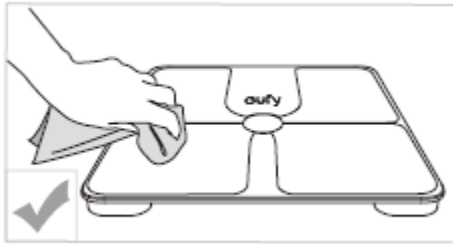

- Nu spălați cântarul cu apă și nu îl scufundați în apă.
- Nu utilizați niciodată detergenți pentru a curăța cântarul, deoarece aceasta poate cauza funcționarea defectuoasă sau decolorarea acestuia.

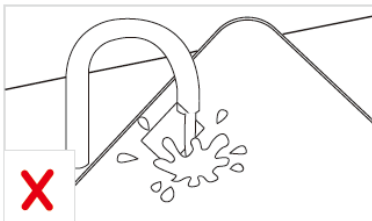

Depanare

Mesaj de eroare

Display de eroare	Descriere	Soluție
	Supraîncărcare. Dispozitivul se va opri.	Nu mai folosiți această cântar pentru măsurare.
	Baterie descărcată. Dispozitivul se va opri.	Înlocuiți toate cele trei baterii în același timp.
	Eșec de măsurare.	• Călcați desculț și păstrați contactul complet cu electrozii. • Stați nemișcat până când măsurarea de pe afișajul LED se blochează.

When Measuring

Problemă	Cauză	Soluție
Rezultate anormale ale măsurătorilor: • Prea sus • Prea jos • Diferență uriașă între două măsurători recente	Poziție incorectă.	Pășește pe cântar desculț și stai pe loc.
	Dispozitivul este plasat pe mochetă moale sau pe o suprafață neuniformă.	Așezați dispozitivul pe o suprafață tare și plană.
Afișajul LED nu se aprinde după ce ați pășit pe cântar.	Bateriile nu sunt instalate.	Instalați trei baterii AAA noi.
	Baterii uzate.	Înlocuiți toate cele trei baterii în același timp.

Cântarul nu procedează la analiza compoziției corporale.	Luarea unei măsurători în timp ce purtați pantofi sau șosete.	Stați desculți pe cântar și mențineți picioarele în contact complet cu electrozii atunci când efectuați o măsurătoare.
	Utilizarea modului de măsurare numai a greutății din aplicația EufyLife.	Schimbați modul de măsurare în aplicația EufyLife.

Specificații

Model	
Putere	4.5 V (3 × AAA baterii)
LED Display	2.6 × 1.2 in / 67 × 29 mm
Unitati de măsură	Pound / Kilogram
Creșteri de unitate	0.1 lb / 0.1 kg
Creșterea unității de grăsime corporală	0.1 %
Creșterea unității de apă corporală	0.1 %
Creșterea unității de masă musculară	0.1 %
Raza de măsurare	11-397 lb / 5-180 kg
Mediu de lucru	Temperatură: 5 - 40 °C Umiditate: 20 - 90% RH
Mediul de stocare	Temperatură: -20 - 50 °C Umiditate: ≤ 90% RH
Gama de frecvențe de operare	2402 - 2480 MHz
Putere de radio-frecvență	4 dBm
Dimensiune	11.0 × 11.0 × 0.9 in / 280 × 280 × 24 mm
Greutate netă	3.31 lb / 1.5 kg

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

parc logistic Terranova, Șoseaua București - Târgoviște nr 12A, Mogoșoaia
de luni până vineri, 9:00-17:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro)

Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)